



PRODUCTINFORMATIE ABDONIMAL CORSET




Dutch

Omschrijving:

De buikband is een 26 centimeter brede, elastische steunband voor compressie en ondersteuning van de buikstreek (abdomen). Door de klittenbandsluiting is de brace gemakkelijk in gebruik.

Maatvoering:

MAAT	BUIK OMTREK	ART.NR.
S	75 - 85 cm	PO 31420 S
M	85 - 95 cm	PO 31420 M
L	95 - 105 cm	PO 31420 L
XL	105-115 cm	PO 31420 XL
XXL	115 - 125 cm	PO 31420 XXL

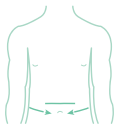

Indicaties: Postoperatief (buikstreek), peritoneaal letsel, postnatale interventies, ondersteuning van de verzwakte buikspieren

Gebruiksaanwijzing:

1. Pak beide uiteinden vast en maak het verband van de rug naar de buik vast met de klittenbandsluiting.
2. Zorg ervoor dat het verband strak genoeg zit, zodat het steun biedt en tegelijkertijd de ademhaling niet belemmert.

Belangrijke informatie en waarschuwingen:

Dit medische product is bedoeld voor gebruik door één individuele patiënt. Het product dient te worden gebruikt in overeenstemming met het advies en de instructies van uw arts. De eerste keer dient het product door een getrainde professional aangelegd te worden.

In gevallen waarin het product door de arts wordt aangeraden om 's nachts te gebruiken, moet men er zeker van zijn dat het de bloedsomloop niet verhindert. Het product dient losgemaakt te worden in geval van gevoelloosheid en indien nodig worden verwijderd. Raadpleeg bij aanhoudende klachten uw arts.

Het product mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte of vlammen. Contact met olie- of zuurhoudende stoffen of lotions met pommesades moet worden vermeden.

Dit product mag niet buiten het toepassingsgebied worden gebruikt of gecombineerd worden met een ander product. Het mag alleen worden gebruikt volgens de oorspronkelijke indicaties.

Dagelijks gebruik en toepassingsduur dienen door de arts te worden bepaald. Overmatig en langdurig gebruik kan spierzwakte veroorzaken. Raadpleeg altijd uw arts voor het juiste draagschema.

Wasinstructies:



PRODUCT INFORMATION ABDOMINAL CORSET




English

Description:

The Abdominal Band is a 26 centimeter wide, elastic support belt for compression and support of the abdominal area (stomach). The Velcro fastener makes the brace easy to use.

Sizes:

SIZE	BELLY SIZE	ART.NR.
S	75 - 85 cm	PO 31420 S
M	85 - 95 cm	PO 31420 M
L	95 - 105 cm	PO 31420 L
XL	105-115 cm	PO 31420 XL
XXL	115 - 125 cm	PO 31420 XXL

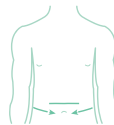

Indications: Postoperative (abdominal region), peritoneal injury, postnatal interventions, support of the weakened abdominal muscles

Manual:

1. Take both ends and fasten the bandage from the back towards the stomach with the Velcro fastener.
2. Make sure that the bandage is tight enough that it provides support and at the same time does not hinder breathing.

Important information and warnings:

This medical product is intended for use by one individual patient. The product should be used in accordance with your doctor's advice and instructions. The product should be installed by a trained professional the first time.

In cases where the product is recommended by the

doctor to be used at night, it must be ensured that it does not interfere with blood circulation. The product should be detached in case of numbness and removed if necessary. Consult your doctor in case of persistent complaints.

The product should not be exposed to excessive heat or flame. Contact with oily or acidic substances or lotions containing pomades should be avoided.

This product must not be used outside its scope or combined with any other product. It should only be used according to the original indications.

Daily use and duration of application should be determined by the physician. Excessive and prolonged use can cause muscle weakness. Always consult your doctor for the correct wearing schedule.

Washing instructions:





INFORMATION PRODUIT ABDOMINAL CORSET




French

Description:

La bande abdominale est une ceinture de soutien élastique de 26 cm de large pour la compression et le soutien de la zone abdominale (estomac). La fermeture Velcro rend le ruban facile à utiliser. Le

Dimensionnement:

TAILLE	TOUR DE VENTRE	ART.NR.
S	75 - 85 cm	PO 31420 S
M	85 - 95 cm	PO 31420 M
L	95 - 105 cm	PO 31420 L
XL	105-115 cm	PO 31420 XL
XXL	115 - 125 cm	PO 31420 XXL

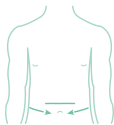

Indications: Postopératoire (région abdominale), lésion péritonéale, interventions postnatales, soutien des muscles abdominaux affaiblis

Manuel d'utilisation:

- Prenez les deux extrémités et fixez le bandage de l'arrière vers le ventre avec la fermeture velcro.
- Assurez-vous que le bandage est suffisamment serré pour offrir un soutien et en même temps ne pas gêner la respiration.

médecin pour être utilisé la nuit, il faut s'assurer qu'il n'interfère pas avec la circulation sanguine. Le produit doit être détaché en cas d'engorgement et retiré si nécessaire. Consultez votre médecin en cas de plaintes persistantes.

Le produit ne doit pas être exposé à une chaleur ou à une flamme excessive. Le contact avec des substances huileuses ou acides ou des lotions contenant des pommades doit être évité. Ce produit ne doit pas être utilisé en dehors de son champ d'application ou combiné avec tout autre produit. Il ne doit être utilisé que selon les indications d'origine.

Informations importantes à Atentions:

Le produit médical est destiné à être utilisé par un patient individuel. Le produit est utilisé dans l'overeenstemming met het advies en de instructies van uw arts. La première clé sert à la porte du produit en tant que professionnel créé.

Dans les cas où le produit est recommandé par le

instructions de lavage:



PRODUKTINFORMATION ABDOMINAL CORSET




Deutsch

die Umschreibung:

Das Abdominal Band ist ein 26 Zentimeter breiter, elastischer Stützgurt zur Kompression und Unterstützung des Bauchbereichs (Bauch). Der Klettverschluss macht das Band einfach zu bedienen.

die Bemessung:

GRÖSSE	BAUCHUMFANG	ART.NR.
S	75 - 85 cm	PO 31420 S
M	85 - 95 cm	PO 31420 M
L	95 - 105 cm	PO 31420 L
XL	105 - 115 cm	PO 31420 XL
XXL	115 - 125 cm	PO 31420 XXL

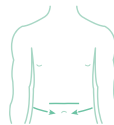

Indikationen: Postoperativ (Bauchregion), Peritonealverletzung, Postnatale Eingriffe, Unterstützung der geschwächten Bauchmuskulatur

Gebrauchsanweisung:

- Nehmen Sie beide Enden und befestigen Sie die Bandage von hinten in Richtung Bauch mit dem Klettverschluss.
- Achten Sie darauf, dass die Bandage ausreichend gespannt ist, dass sie Halt gibt und gleichzeitig die Atmung nicht behindert wird.

Anwendung empfohlen wird, Sie achten, dass es die Durchblutung nicht beeinträchtigt. Bei Taubheitsgefühl sollte das Produkt abgenommen und bei Bedarf entfernt werden. Bei anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Das Produkt sollte keiner übermäßigen Hitze oder Flamme ausgesetzt werden. Der Kontakt mit öligen oder sauren Substanzen oder pomadenhaltigen Lotionen sollte vermieden werden.

Dieses Produkt darf nicht außerhalb seines Geltungsbereichs verwendet oder mit anderen Produkten kombiniert werden. Es sollte nur gemäß den Originalindikationen verwendet werden.

Wichtige Informationen und Warnungen:

Dieses Medizinprodukt ist für die Anwendung durch einen einzelnen Patienten bestimmt. Das Produkt sollte gemäß den Anweisungen und Anweisungen Ihres Arztes verwendet werden.

Die tägliche Anwendung und die Anwendungsdauer sollten vom Arzt festgelegt werden. Übermäßiger und längerer Gebrauch kann Muskelschwäche verursachen. Fragen Sie immer Ihren Arzt nach dem richtigen Trageplan

Das Produkt sollte beim ersten Mal von einem geschulten Fachmann installiert werden.

Im Falle das Produkt vom Arzt zur nächtlichen

Waschanleitung:

